

VITAPAN PLUS®

Produktinformation/Formenkarte




VITA Farbnahme

VITA Farbkommunikation

VITA Farbproduktion

VITA Farbkontrolle

Stand 01.11

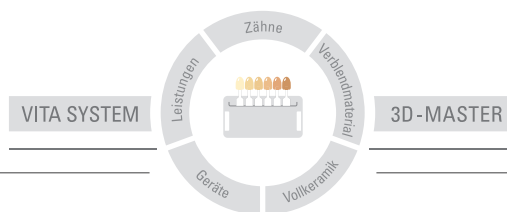

VITA

Erhältlich in VITA SYSTEM 3D-MASTER
(1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4M2, 5M1)
und VITA classical A–D Farben
(A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C2, D3, D4).



VITAPAN PLUS® Innen vollkommen. Außen vollendet.

Fortschritt ist die Summe aus Bewährtem und Neuem. Mit dieser Maxime hat VITA den Klassiker VITAPAN modernisiert und erneut zukunftsweisend gestaltet. Dies gilt vor allem für die weiter entwickelten anatomischen Merkmale. Damit bildet der neue VITAPAN PLUS die perfekte Symbiose aus Ästhetik und Funktion.

Zugleich ist VITAPAN PLUS Ergebnis des konsequenten Strebens von VITA, auf Ihre Anforderungen zu reagieren und Ihre Prozesse unter Fortführung der gewohnten Arbeitsweise stetig zu optimieren. All dies ist Ihr Gewinn an Sicherheit, Kundenzufriedenheit und Zukunftssicherung. Denn in der Summe steht bei VITAPAN jetzt ein noch größeres PLUS.



VITAPAN PLUS® Aus weltweiten Kundenansprüchen geformt.

„Überzeugende Neuerungen, welche das Aufstellungsspektrum erweitern.“

„Konsequente und sehr gelungene Weiterentwicklungen.“

„Exzellente Anatomie mit naturidentischen Eigenschaften.“

„Beeindruckende Ästhetik durch Schmelzverlauf und Tiefenwirkung der Farbe.“

„Oberfläche und Schichtung machen die Zähne zu einem Erlebnis.“



In über 10 Ländern von rund 300 Workshop-Teilnehmern getestet. Das Ergebnis: Mehr als 90 Prozent Zustimmung.


„VITAPAN PLUS liefert mir die Antwort auf den gestiegenen Effizienzdruck.
Für mich ein echter Meilenstein.“

„VITAPAN PLUS ist für mich eine neue Liga multifunktioneller
und formvollendeter Zahnversorgung.“

„Ausgeprägte Zahnalsbereiche für altersgerechte und
hygienefreundliche Zahnfleischgestaltung.“

„Sinnvolle Straffung des Formenangebots in
zweckmäßiger Größenverteilung.“

VITAPAN PLUS® innen vollkommen, außen vollendet.

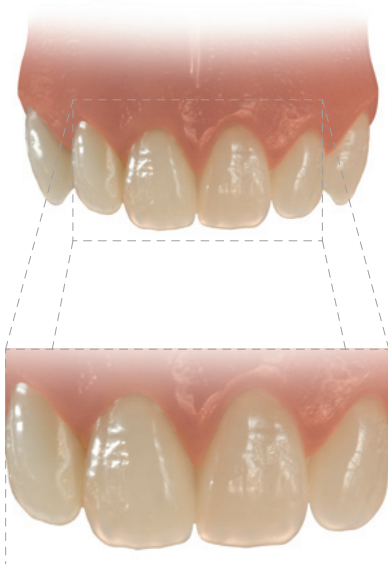

**Authentische Oberflächenmorphologie und
individuelle Mamelonstruktur**

 für eine lebendige Lichtreflexion.

Opaleszenz, Lumineszenz und Transluzenz

 für ein nunancenreiches Farbspiel.

Weißliche Inzisalsäume

 für naturidentische Ästhetik.

VITAPAN PLUS® innen vollkommen, außen vollendet.



Horizontale und vertikale Krümmungsmerkmale



für eine wirksame Abstützung der Lippe zum Erhalt der individuellen Physiognomie.



Naturidentische Ausgestaltung der Palatinalflächen



für den Erhalt der Phonetik und das gewohnte Zungengefühl.



Deutliche Winkelmerkmale



für ein natürlich anmutendes und ästhetisch überzeugendes Ergebnis.

Typengerechte labiale Randleistengestaltung



zur Betonung der Patientenindividualität.



Leicht verbreiterte Zahnalsbereiche mit einem stufenlosen Übergang vom Zahnals zur Zahnkrone



für größte Vielfalt: Jede Garnitur bietet, durch einen in der Höhe individuell gestalteten Zahnfleischverlauf, mehrere Möglichkeiten für eine altersgerechte Prothese.



für eine facettenreiche und hygienefreundliche Zahnfleischmodellation mit einem sicheren interdentalen Verschluss.



für eine wohlproportionierte Interdentalraumgestaltung bei guter Abdeckung möglicher Konstruktionselemente.

VITAPAN PLUS® Sortiment konzentriert, Vielfalt maximiert.

VITAPAN PLUS®



kombinierbar mit

VITA PHYSIODENS®



VITA LINGOFORM®



VITAPAN® CUSPIFORM



VITAPAN® SYNOFORM



Farbangabe

VITA SYSTEM 3D-MASTER®

(mit bester Annäherung an VITA classical A1–D4)

VITA classical A1–D4

Typangabe

Formenangabe

(Garniturbezeichnung beschreibt gleichzeitig die Circa-Breite der Garnitur)




LOT-Nr.
in Klarschrift


Data Matrix Code

CE 0124 auf der Rückseite

VITAPAN PLUS® Obere Frontzähne

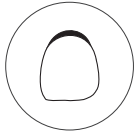

Schaufelförmig

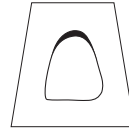

Dreieckig


O41



T44



O45

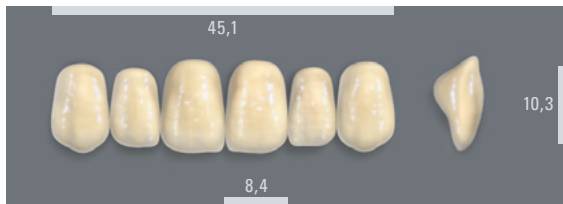

T46



O47




T47



O51



T48

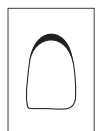

Rechteckig

R47



R49



VITAPAN PLUS® Untere Frontzähne und Kombinationstabelle

L33



L35



L37






L39




L41






| Nr. |  mm |  |  | Nr. | |
|------------|---|---|---|--------------------|--|
| O41 | 41,3 | 9,1 | 7,4 | L33 33,2 | 41C 11S 20E 21L 29,9 30,0 29,4 30,1 31,3 31,9 31,0 30,7 |
| O45 | 45,1 | 10,3 | 8,4 | L35 35,3 | 42C 12S 22E 22L 31,7 31,1 32,9 31,6 33,4 32,7 33,7 32,1 |
| O47 | 47,3 | 10,8 | 8,6 | L37 37,3 | 42C 12S 22E 24L 31,7 3,1 32,9 31,6 33,4 32,7 33,7 32,1 |
| O51 | 51,4 | 11,9 | 9,3 | L41 41,2 | 45C 14S 24E 24L 34,8 33,1 34,8 35,8 36,3 35,4 36,1 36,4 |
| T44 | 44,1 | 9,9 | 8,1 | L33 33,2 | 41C 11S 20E 21L 29,9 30,0 29,4 30,1 31,3 31,9 31,0 30,7 |
| T46 | 46,2 | 10,4 | 8,2 | L35 35,3 | 42C 13S 23E 22L 31,7 31,3 33,5 31,6 33,4 33,9 34,6 32,1 |
| T47 | 46,9 | 10,9 | 8,5 | L37 37,3 | 42C 13S 22E 22L 31,7 31,3 32,9 31,6 33,4 33,9 33,7 32,1 |
| T48 | 48,1 | 11,3 | 8,7 | L37 37,3 | 42C 14S 23E 22L 31,7 33,1 33,5 31,6 33,4 35,4 34,6 32,1 |
| R47 | 47,0 | 11,2 | 8,6 | L37 37,3 | 42C 13S 23E 22L 31,7 31,3 33,5 31,6 33,4 33,9 34,6 32,1 |
| R49 | 49,1 | 11,7 | 8,9 | L39 39,0 | 45C 14S 23E 23L 34,8 33,1 33,5 34,2 36,3 35,4 34,6 34,8 |

Die Angaben in der Kombinationstabelle sind allgemeine unverbindliche Orientierungswerte, die sich je nach individueller Situation des Patienten ändern können.

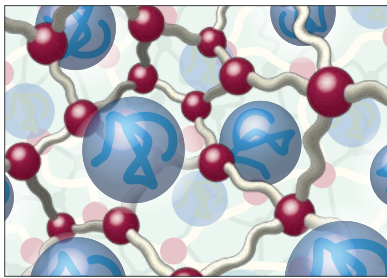VITAPAN PLUS® Von größter Substanz.



-  PMMA-Perlen, durch Monomer angequollen
-  vernetztes Monomer
-  anorganischer Mikropartikel-Füllstoff, ins Polymernetzwerk einpolymerisiert



VITAPAN® VITAPAN PLUS® VITA PHYSIODENS® VITA LINGOFORM®

Zähne im VITA MRP-Material – millionenfach erfolgreich verarbeitet:

- außergewöhnlich in der Ästhetik
- sicher in der Verarbeitung
- zuverlässig im Trageverhalten
- vortrefflich in der Materialqualität – die einzigen Zähne, die durch alle Schichten hindurch **homogen aus einem durchgängig mikrogefüllten Material** bestehen und sich durch außergewöhnliche Abrasionsresistenz und Bruchfestigkeit auszeichnen.


Bei dem von VITA entwickelten **MRP-Material (Microfiller Reinforced Polyacrylic)** werden anorganische Mikrofüllstoffe mit einer optimal abgestimmten Partikelgrößenverteilung in das polymere Netzwerk einpolymerisiert.

Dies gewährleistet ein durchgängig einheitliches und hochqualitatives Eigenschaftsprofil im gesamten Zahn.

Im weiteren wird durch den einzigartigen VITA-Herstellprozess NPV (**Nachpressverfahren**) **ein durch und durch homogener Schichtaufbau** geschaffen, der sich **durch einen innigen Verbund von Hals, Dentin und Schmelz – alle aus ein und demselben Material – auszeichnet.**

Darüber hinaus ergibt sich aus dem chemischen Aufbau eine hohe mechanische Belastbarkeit – unabhängig davon, ob es sich um Schleimhaut- oder Implantat getragene Versorgung handelt.

VITA MRP – exzellente Abrasionswerte

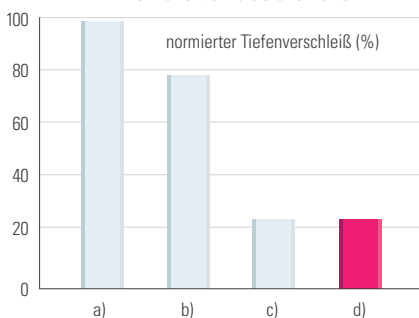

- a) vernetztes PMMA
- b) hochvernetztes PMMA
- c) Nano Hybrid/Nano Filled Composite
- d) VITA MRP

Quelle: In-vitro Verschleissuntersuchungen, Universität Regensburg, Deutschland

Eigenschaften

- überragende Abrasionsfestigkeit
- gewebefreundlich und plaqueresistent
- splitterfrei und ohne Qualitätsverluste in Farbe und Material bearbeitbar
- ausgezeichnet polierbar – auch nach dem Einschleifen im Mund
- exzellent in der Verbindung zum Prothesenbasismaterial

Auswirkungen

- lange Lebensdauer der Prothese
- hohe Biokompatibilität und ausgezeichneter Tragekomfort
- bei entsprechenden Voraussetzungen besonders gut geeignet für Implantatversorgungen
- sehr schnelle Akzeptanz des Zahnersatzes seitens der Patienten

Nutzen

- Sicherheit im Prothesenherstellungsprozess
- rundum zufriedene Patienten
- Imageaufbau und -pflege für Labor und Praxis

Farben



| VITA SYSTEM 3D-MASTER® | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|-----|-----|--------|-------|--------|-------|-------|-----|
| 1M1 | 2L1.5 | 2M1 | 2M2 | 3L1.5 | 3L2.5 | 3M2 | 3R2.5 | 4L1.5 | 5M1 |
| ~B1 | ~B2 | ~A1 | ~A2 | ~C2/D4 | ~B3 | ~A3/D3 | ~A3,5 | ~A4 | ~C4 |



| VITA classical A1–D4 | | | | | | | | | |
|----------------------|----|----|------|----|----|----|----|----|----|
| A1 | A2 | A3 | A3.5 | A4 | B2 | B3 | C2 | D3 | D4 |

Indikationen


- Totalprothetik
- Implantatprothetik
- Geschiebearbeiten
- Modellgussprothesen
- Teleskop- und Konusarbeiten

| Sortimente* | |
|--|--|
| Lebende Formenkarte mehrfarbig in Aluschatulle: | 10 OK FZ + 5 UK FZ Garnituren x 6 = 90 Zähne |
| Zahnlager 1S: | 48 OK FZ + 24 UK FZ Garnituren x 6 = 432 Zähne |
| Zahnlager 2S mit VITA LINGOFORM® SZ: | 48 OK FZ + 24 UK FZ Garnituren x 6 = 432 Zähne 24 OK SZ + 24 UK SZ Garnituren x 8 = 384 Zähne |
| Zahnlager 2S mit VITAPAN® CUSPIFORM SZ: | 48 OK FZ + 24 UK FZ Garnituren x 6 = 432 Zähne 24 OK SZ + 24 UK SZ Garnituren x 8 = 384 Zähne |
| Zahnlager Vario VITAPAN PLUS®, S: | (134 Garnituren, 804 Zähne) |
| Zahnlager Vario VITAPAN PLUS®, M: | (267 Garnituren, 1602 Zähne) |
| Zahnlager Vario VITAPAN PLUS®, L: | (400 Garnituren, 2400 Zähne) |

*Informationen über genaue Spezifikationen der Lager erhalten Sie von dem VITA Mitarbeiter Ihrer Region oder über Ihr Depot.

Diese Produktgruppe ist in VITA SYSTEM 3D-MASTER und VITA classical A1–D4 Farben erhältlich. Farbliche Kompatibilität mit allen VITA SYSTEM 3D-MASTER und VITA classical Materialien ist gewährleistet.

Mit dem einzigartigen VITA SYSTEM 3D-MASTER werden alle natürlichen Zahnfarben systematisch bestimmt und vollständig reproduziert.

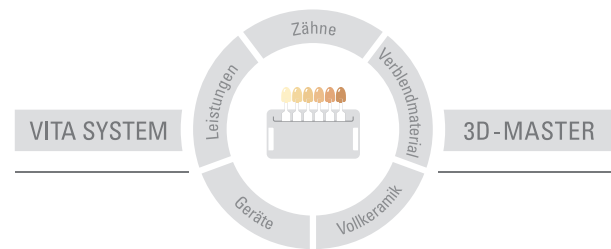

Zur Beachtung: Unsere Produkte sind gemäß Gebrauchsinformationen zu verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die sich aus unsachgemäßer Handhabung oder Verarbeitung ergeben. Der Verwender ist im Übrigen verpflichtet, das Produkt vor dessen Gebrauch auf seine Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Eine Haftung unsererseits ist ausgeschlossen, wenn das Produkt in nicht vertraglichem bzw. nicht zulässigem Verbund mit Materialien und Geräten anderer Hersteller verarbeitet wird. Im Übrigen ist unsere Haftung für die Richtigkeit dieser Angaben unabhängig vom Rechtsgrund und, soweit gesetzlich zulässig, in jedem Falle auf den Wert der gelieferten Ware lt. Rechnung ohne Umsatzsteuer begrenzt. Insbesondere haften wir, soweit gesetzlich zulässig, in keinem Fall für entgangenen Gewinn, für mittelbare Schäden, für Folgeschäden oder für Ansprüche Dritter gegen den Käufer. Verschuldensabhängige Schadensersatzansprüche (Verschulden bei Vertragsabschluss, pos. Vertragsverletzung, unerlaubte Handlungen etc.) sind nur im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit gegeben. Herausgabe dieser Gebrauchsinformation: 01.11

Die VITA Zahnfabrik ist nach der Medizinprodukterichtlinie zertifiziert und die folgenden Produkte tragen die Kennzeichnung **CE 0124** :
VITAPAN PLUS®

US 5498157 A · AU 659964 B2 · EP 0591958 B1

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com